



BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIÊU TW
QUY HÒA
KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH

Mã số: **XN-QTQL 5.8.3**
 Lần ban hành: 01
 Ngày ban hành: .../01/2026
 Số trang: 09

QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

	Người biên soạn	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts.Vũ Tuấn Anh
Ký tên			
Chức vụ	KTV.Trưởng khoa	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	01/01/2026	08/01/2026	/01/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

1. Mục đích

Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng để đạt được kết quả xét nghiệm chính xác và tin cậy.

2. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng đối với tất cả các trường hợp sử dụng quy trình Đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

- Tất cả nhân viên, cán bộ Khoa Vi sinh-Miễn dịch, nhân viên tham gia trực, học việc tại Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

3. Trách nhiệm

- Nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện các thao tác liên quan đến xét nghiệm đều phải tuân thủ đúng quy trình.

- Cán bộ QLCL, nhóm trưởng các nhóm chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy trình.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

QC	Quality control (kiểm tra chất lượng xét nghiệm).
QLCL	Quản lý chất lượng.
ĐBCL	Đảm bảo chất lượng
Calibration	Hiệu chuẩn xét nghiệm
IQC	Internal quality control (Nội kiểm tra)
EQA	External quality assessment (Ngoại kiểm tra)

5. Nội dung thực hiện

Khoa đảm bảo chất lượng xét nghiệm bằng cách thực hiện đúng theo các quy trình trước, trong và sau xét nghiệm.

5.1. Giai đoạn trước xét nghiệm: là các bước bắt đầu của quá trình xét nghiệm và kết thúc khi giai đoạn xét nghiệm bắt đầu.

- Khâu hành chính: nhập thông tin vào máy tính, in chỉ định (nếu có), tiếp nhận giấy chỉ định, kiểm tra đối chiếu thông tin trên giấy chỉ định, in và dán Barcode (tránh nhầm lẫn).

- Khâu lấy bệnh phẩm: Lấy bệnh phẩm tại chỗ cho bệnh nhân, chú ý đến tình trạng sinh lý của bệnh nhân, lấy đúng loại ống/lọ, đúng lượng, tránh tiêu huyết, hẹn giờ trả

Quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm	Mã số: XN-QTQL 5.8.3
---	----------------------

kết quả xét nghiệm.

- Khâu vận chuyển bệnh phẩm: mẫu được chuyển đến phòng nhận mẫu và tiếp nhận mẫu.
- Yêu cầu tuân thủ các theo quy trình chuẩn, hướng dẫn công việc sau:

Quy trình, hướng dẫn	Mã quy trình
Sổ tay dịch vụ khách hàng	XN-STDVKH
Hướng dẫn tiếp nhận mẫu bệnh phẩm	HDCV 5.8.01
Hướng dẫn lấy mẫu máu tĩnh mạch	HDCV 5.8.02
Hướng dẫn nhập thông tin bệnh nhân	HDCV 5.8.03
Hướng dẫn nhập thông tin chỉ định Xét nghiệm trên Phần mềm HIS	HDCV 5.4.03
Quy trình vận hành máy ly tâm	XN-QTKT.TBHS.01

5.2. Giai đoạn trong xét nghiệm

- Tập hợp các thao tác phân tích định lượng, bán định lượng, định tính, các thành phần trong mẫu bệnh phẩm.
- Trang thiết bị: Được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, mỗi máy đều được phân công người phụ trách và định kỳ có kỹ sư của hãng kiểm tra bảo trì máy.
- Nhân viên được phân công vận hành máy biết sử dụng máy thành thạo, làm đúng theo quy trình.
- Hóa chất:
 - + Lựa chọn hóa chất cũng như phương pháp xét nghiệm phù hợp.
 - + Tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện bảo quản hóa chất theo yêu cầu của nhà sản xuất.
 - + Phân công người phụ trách việc kiểm tra, bảo quản và theo dõi quản lý hóa chất.
 - + Thực hiện nghiêm quy trình hoàn nguyên trở lại chất chuẩn và huyết thanh kiểm tra trước khi chạy chuẩn và nội kiểm tra chất lượng.

5.2.1. Nội kiểm chất lượng (IQC)

- Nhân viên QLCL, phụ trách khoa thường xuyên đánh giá các hoạt động tổng thể của phòng xét nghiệm, đánh giá các kết quả xét nghiệm có phù hợp với lâm sàng hay không trước khi trả kết quả xét nghiệm.
- Kiểm tra chất lượng các xét nghiệm làm tăng độ chính xác và độ xác thực của một phương pháp xét nghiệm. Quản lý và kiểm tra hai yếu tố này có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng xét nghiệm, nhằm đảm bảo kết quả xét nghiệm đạt giá trị tin cậy.

Phiên bản: 1.0	Trang: 3/9
Ngày ban hành:/01/2026	

Quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm	Mã số: XN-QTQL 5.8.3
---	----------------------

- Tất cả các tài liệu liên quan đến kiểm tra chất lượng phải được lưu giữ trong 3 năm.
- Khoa Vi sinh-Miễn dịch có chương trình kiểm tra về các loại xét nghiệm đang làm, trang thiết bị, hoá chất sinh phẩm, tay nghề nhân viên. Một số chương trình sau đang được thực hiện:

STT	Hoạt động nội kiểm	Nội dung thực hiện
1.	Tất cả mọi thời điểm	- Rà soát kết quả nếu có sự tương đồng cùng tăng hoặc giảm giữa các mẫu bệnh nhân khác nhau. Nhân viên có trách nhiệm xem xét tình trạng máy móc, hóa chất, môi trường bằng việc chạy mẫu IQC cùng với mẫu bệnh nhân nếu phát hiện sai số cần thông báo cho nhân viên duyệt kết quả và nhân viên phụ trách phối hợp đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. So sánh sự tương quan giữa kết quả xét nghiệm với tình trạng lâm sàng.

Phiên bản: 1.0	Trang: 4/9
Ngày ban hành:/01/2026	

Quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm	Mã số: XN-QTQL 5.8.3
---	----------------------

2.	Hàng ngày	- Kiểm tra thiết bị, hóa chất, hiệu chuẩn, điều kiện môi trường khoa bằng “vật liệu kiểm tra”. Thực hiện nội kiểm hàng ngày và ghi nhận lại trên biểu đồ Levey-Jennings. Với các xét nghiệm định lượng cần thực hiện theo dõi kết quả nội kiểm quả trên biểu đồ Levey- Jennings và áp dụng quy tắc Westgard thực hiện biện pháp khắc phục nếu có. Nhân viên QLCL kiểm soát kết quả chạy nội kiểm hàng ngày. - Kiểm tra những khác biệt quan trọng giữa các kết quả khi xét nghiệm lặp lại mẫu của bệnh nhân. <i>Lưu ý: Khi kết quả nội kiểm không đạt, khoa sẽ giữ lại kết quả của bệnh nhân và tiến hành song song các hành động sau:</i> <i>Hành động 1: Thông báo cho bệnh nhân, bác sỹ chỉ định về việc tạm hoãn việc trả kết quả đồng thời hẹn lại giờ trả kết quả cho bệnh nhân.</i> <i>Hành động 2. Nhân viên tiến hành chạy mẫu bệnh nhân trên thiết bị dự phòng (nếu có) đồng thời tìm nguyên nhân sai số, đề xuất biện pháp khắc phục, lưu hồ sơ nhật ký theo dõi việc thực hiện nội kiểm tra. Chạy lại xét nghiệm cho bệnh nhân khi nội kiểm đạt.</i>
3.	Hàng tuần	+ Hiệu chuẩn các xét nghiệm theo lịch cố định để đảm bảo chất lượng xét nghiệm.
4.	Hàng tháng, hàng năm.	- Nhân viên quản lý chất lượng đánh giá, báo cáo kết quả nội kiểm hàng tháng cho trưởng khoa. - Hướng dẫn nhân viên khắc phục các sai số xét nghiệm. - Đánh giá thiết bị, phương pháp xét nghiệm, hóa chất môi trường đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao, cải tiến chất lượng Xét nghiệm. - Tổng hợp, tham mưu lãnh đạo về các hoạt động quản lý chất lượng để triển khai cho Khoa. - Hiệu chuẩn, bảo dưỡng các loại pipet và các máy phân phối tự động theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Phiên bản: 1.0	Trang: 5/9
Ngày ban hành:01/2026	

Quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm	Mã số: XN-QTQL 5.8.3
---	----------------------

5.2.2. Ngoại kiểm tra (EQA)

- Khoa Vi sinh-Miễn dịch tiến hành ngoại kiểm theo hợp đồng với Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng Tp.HCM

- Mục đích

- + Đảm bảo sự tin cậy của kết quả xét nghiệm.
- + Đánh giá chất lượng của một phòng xét nghiệm một cách khách quan.
- + Xác định những sai số về kết quả xét nghiệm và có biện pháp khắc phục.
- + Khuyến khích sử dụng phương pháp chuẩn, máy móc thuốc thử có chất lượng tốt.
- + Khuyến khích nội kiểm thường xuyên.
- + Đối chiếu so sánh kết quả xét nghiệm của mỗi phòng xét nghiệm với kết quả của các labo tham chiếu trong nước hoặc quốc tế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xét nghiệm của các phòng xét nghiệm.


5.3. Giai đoạn sau xét nghiệm.

- Là các bước tiếp theo giai đoạn xét nghiệm đến khi quá trình xét nghiệm kết thúc.
- Yêu cầu thực hiện theo quy trình chuẩn và hướng dẫn công việc sau:

Hướng dẫn in và trả kết quả xét nghiệm	HDCV 5.8.09
Quy trình trả kết quả xét nghiệm	XN-QTQL 5.8.10
Quy trình công bố kết quả	XN-QTQL 5.8.11
Quy trình rà soát kết quả	XN-QTQL 5.8.8
Quy trình lưu và tiêu hủy bệnh phẩm	XN-QTQL 5.8.9

Phiên bản: 1.0	Trang: 6/9
Ngày ban hành:01/2026	

5.4. Quy trình hoạt động của Khoa Vi sinh-Miễn dịch

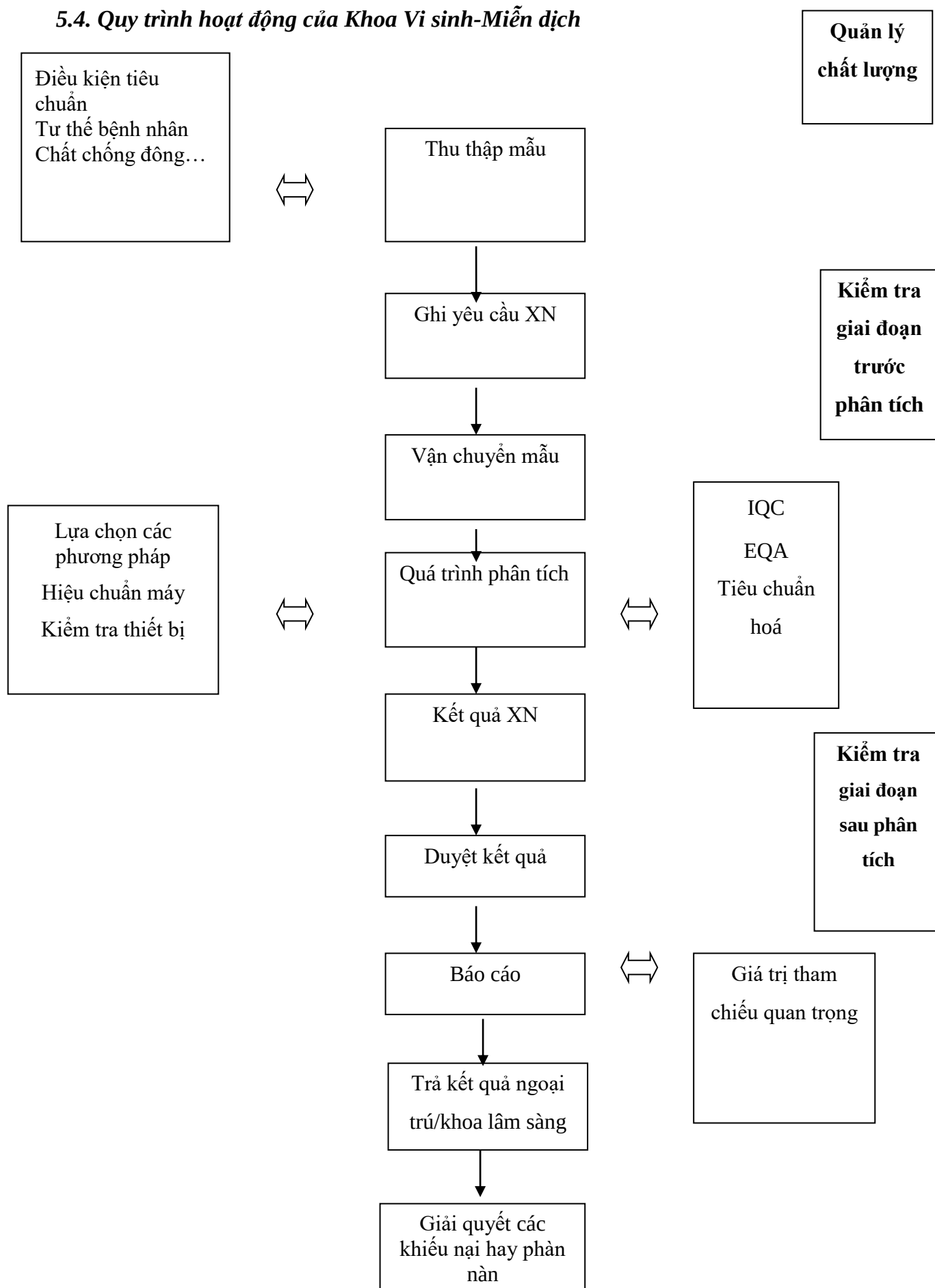

Quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm	Mã số: XN-QTQL 5.8.3
---	----------------------

6. Lưu trữ hồ sơ

- Lưu tất cả các kết quả xét nghiệm nội kiểm và ngoại kiểm trong hồ sơ nội kiểm và hồ sơ ngoại kiểm.
- Ghi chép đầy đủ vào lịch bảo trì máy, lịch hoạt động, sổ khắc phục sự cố hay các hoạt động khác.
- Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm. Thời gian lưu 20 năm.

7. Tài liệu liên quan

<i>Quy trình, hướng dẫn</i>	<i>Mã quy trình</i>
Sổ tay dịch vụ khách hàng	XN-STDVKH
Quy trình chuẩn bị trước xét nghiệm	XN-QTQL 5.8.1
Quy trình nội kiểm tra xét nghiệm định lượng	XN-QTQL 5.8.4
Quy trình nội kiểm tra xét nghiệm định tính và bán định lượng	XN-QTQL 5.8.5
Quy trình ngoại kiểm tra xét nghiệm	XN-QTQL 5.8.6
Quy trình tạm dừng trả kết quả khi kết quả nội kiểm không đạt	XN-QTQL 5.8.7
Quy trình rà soát kết quả	XN-QTQL 5.8.8
Quy trình lưu và tiêu hủy bệnh phẩm	XN-QTQL 5.8.9
Quy trình trả kết quả xét nghiệm	XN-QTQL 5.8.10
Quy trình công bố kết quả	XN-QTQL 5.8.11
Quy trình hướng dẫn biên soạn thảo quy trình chuẩn	XN-QTQL 5.2.2
Quy trình quản lý hồ sơ	XN-QTQL 5.2.3
Hướng dẫn tiếp nhận mẫu bệnh phẩm	HDCV 5.8.01
Hướng dẫn lấy mẫu máu tĩnh mạch	HDCV 5.8.02
Hướng dẫn nhập thông tin bệnh nhân	HDCV 5.8.03
Quy trình hướng dẫn an toàn	XN-QTQL 5.12.2
Hướng dẫn pha, bảo quản, sử dụng vật liệu chuẩn (Calibrator)	HDCV 5.8.04
Hướng dẫn pha, bảo quản, sử dụng vật liệu kiểm tra (QC)	HDCV 5.8.05
Hướng dẫn khắc phục sự cố nội kiểm	HDCV 5.8.06

Phiên bản: 1.0	Trang: 8/9
Ngày ban hành:01/2026	

Quy trình đảm bảo chất lượng xét nghiệm	Mã số: XN-QTQL 5.8.3
Hướng dẫn khắc phục sự cố ngoại kiểm	HDCV 5.8.07
Hướng dẫn chạy ngoại kiểm	HDCV 5.8.08
Hướng dẫn in và trả kết quả xét nghiệm	HDCV 5.8.09
Hướng dẫn phê duyệt phương pháp xét nghiệm	HDCV 5.8.10

8. Tài liệu tham khảo

- Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa. Tác giả: Trần Hữu Tâm.
- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

Phiên bản: 1.0	Trang: 9/9
Ngày ban hành:01/2026	